

L6 SPECIALS FRAMES

ESTRUTURAS ESPECIAIS
STRUCTURES SPÉCIALES



SPECIAL FRAMES

For special frames, we mean all frames that support the extra needs in a laboratory, such as reinforced tables for loads higher than those recommended for other structures, so Industrial Laborum presents a wide range of products to meet all the needs of the user.

The special frames are very adaptable and flexible, and can be customized, changed or simply idealized of the needs of the users. However we have 4 standard possibilities: Reinforced tables for high distributed loads; Mobile tables for a great flexibility in your laboratory; Height adjustable reinforced tables; Height adjustable mobile table.

The height adjustable tables are of standard mechanical adjustment (through bolts or spring pins), although Industrial Laborum Ibérica offers the option of electric adjustment, more comfortable and smooth, with a control with 3 predefined measures and manual adjustment.

The Customization and development of new products are one of the trademark images of our company, always looking for new ways to satisfy our customers.

ESTRUTURAS ESPECIAIS

Por estruturas especiais entende-se todas as estruturas que suportam as necessidades extras de um laboratório, como mesas reforçadas para cargas superiores às recomendadas para outras estruturas. Assim a Industrial Laborum apresenta uma ampla gama de produtos para atender a todas as necessidades do usuário.

As estruturas especiais são bastante adaptáveis e flexíveis, podendo ser customizadas, alteradas ou simplesmente idealizadas das necessidades dos utilizadores. No entanto apresentamos 4 possibilidades standard: Mesas reforçadas para cargas distribuídas altas; Mesas rodadas para uma grande flexibilidade no seu laboratório; Mesas ajustáveis em altura reforçada; Mesa ajustável em altura rodada.

As mesas ajustáveis em altura são de ajuste mecânico standard, através de parafusos ou pinos de mola. Não obstante, a Industrial Laborum Ibérica oferece a opção de ajuste elétrico, mais cómodo e suave, com um controlo para 3 medidas predefinidas e ajuste manual.

A Customização e desenvolvimento de novos produtos são uma das imagens de marca da nossa empresa, estando sempre á procura de novas formas de satisfazer os nossos clientes.

STRUCTURES SPÉCIALES

Pour les structures spéciales, nous entendons toutes les structures qui répondent aux besoins supplémentaires d'un laboratoire, telles que les tables renforcées pour des charges supérieures à celles recommandées pour les autres structures. C'est pourquoi Industrial Laborum présente une vaste gamme de produits répondant à tous les besoins de l'utilisateur.

Les structures spéciales sont très flexibles et adaptables, et peuvent être personnalisées, modifiées ou simplement idéalisées des besoins des utilisateurs. Cependant, nous avons 4 possibilités standard: Des tables renforcées pour des charges réparties élevées; Des tables sur roulettes pour une grande flexibilité dans votre laboratoire; Des tables ajustables en hauteur renforcée; Des tables ajustables en hauteur sur roulettes.

Les tables réglables en hauteur ont un réglage mécanique standard (par vis ou goupilles élastiques), bien que Industrial Laborum Ibérica offre la possibilité d'un réglage électrique, plus confortable et plus lisse, avec une commande de 3 mesures prédéfinies et un réglage manuel.

La personnalisation et le développement de nouveaux produits sont l'une des images de marque de notre entreprise, toujours à la recherche de nouvelles façons de satisfaire nos clients.

L6 SPECIALS FRAMES

ESTRUTURAS ESPECIAIS
STRUCTURES SPÉCIALES

Electric height adjustment
Ajuste de altura eléctrico
Réglage en hauteur électrique



Mechanic height adjustment
Ajuste de altura mecânico
Réglage en hauteur mécanique



FRAMES

With reinforced, mobile and height adjustable tables, it offers high mechanical strength, corrosion resistance, impact and abrasion resistance, high structural and dimensional stability, smooth surfaces of easy cleaning and disinfection and the load capacity varies according to the users' needs.

Tube and sheet steel construction coated with epoxy-polyester resins, with levelers that compensate for unevenness of the floor with regulation between -5mm and + 20mm or in case of movable tables, castors with locking system.


The height adjustable tables are of standard mechanical adjustment (through bolts or spring pins), although Industrial Laborum Ibérica offers the option of electric adjustment, more comfortable and smooth, with a control with 3 predefined measures and manual adjustment.

ESTRUTURA

Com mesas reforçadas, giratórias e ajustáveis em altura, oferecem alta resistência mecânica, resistência à corrosão, resistência a impacto e abrasão, alta estabilidade estrutural e dimensional, superfícies lisas de fácil limpeza e desinfecção e capacidade de carga varia de acordo com as necessidades dos usuários.

Construção em tubo e em chapa de aço em pó revestido com resinas de epóxi-poliéster, com niveladores que garantem a compensação das irregularidades do piso com a regulação entre -5mm e + 20mm ou no caso das mesas móveis, rodízios com sistema de travamento.

As mesas ajustáveis em altura são de ajuste mecânico standard, (através de parafusos ou pinos de mola), não obstante a Industrial Laborum Ibérica oferece a opção de ajuste eléctrico, mais cómodo e suave, com um controlo de 3 medidas predefinidas e ajuste manual.

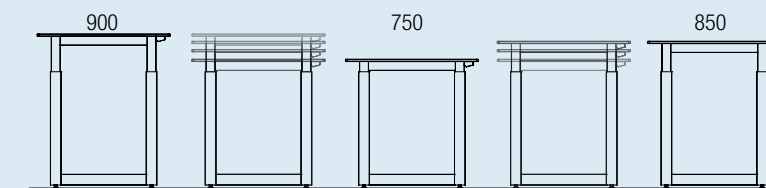

STRUCTURE

Avec des tables renforcées, pivotantes et réglables en hauteur, offrent une résistance mécanique élevée, une résistance à la corrosion, une résistance aux chocs et à l'abrasion, une grande stabilité structurelle et dimensionnelle, des surfaces lisses faciles à nettoyer et à désinfecter et varie en fonction des besoins des utilisateurs.

Construction en tube et tôle d'acier peinte époxy avec des résines de polyester, avec des niveleurs qui garantissent la compensation des irrégularités du sol avec une régulation entre -5 mm et + 20 mm ou, dans le cas des tables mobiles, des roulettes avec système de blocage.

Les tables réglables en hauteur ont un réglage mécanique standard (à travers des vis ou des goupilles élastiques), bien que Industrial Laborum Ibérica offre la possibilité d'un réglage électrique, plus confortable et plus lisse, avec une commande de 3 mesures prédéfinies et un réglage manuel.

MATERIALS AND CODIFICATION
MATERIAIS E CODIFICAÇÃO
MATÉRIEL ET CODIFICATION

SHEET STEEL
CHAPA DE AÇO
TÔLE D'ACIER

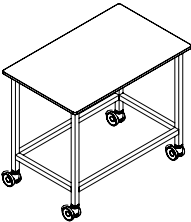


Table with 6 columns: Dimensions (L x W x H*), Product Code, and Name. Rows include various table sizes like 900x650x700, 1000x650x700, etc.

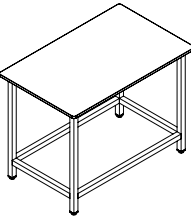


Table with 6 columns: Dimensions (L x W x H*), Product Code, and Name. Rows include various table sizes like 900x650x700, 1000x650x700, etc.




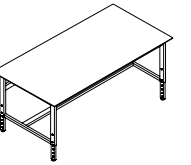


Table with 6 columns: Dimensions (L x W x H*), Product Code, and Name. Rows include various table sizes like 1000x800x700/850, 1200x800x700/850, etc.

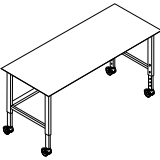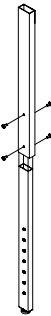

*Length x Width x Height
*Comprimento x Largura x Altura
*Longueur x Largeur x Hauteur


Mechanic height adjust system
Sistema mecânico de ajuste em altura
Système de réglage mécanique de la hauteur

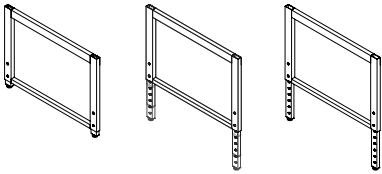


Optional height adjust

Ajuste de altura opcional
Réglage de la hauteur optionnel

Electric height adjust system
Sistema eléctrico de ajuste em altura
Système de réglage électrique de la hauteur

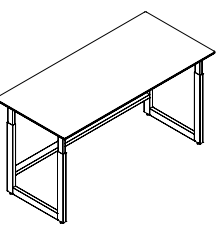


Electric height adjustable table
Mesa com ajuste de altura eléctrico
Table avec réglage électrique de la hauteur

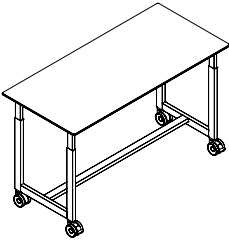


Electric height adjustable table with casters
Mesa com ajuste em altura eléctrico com rodízios
Table électrique réglable en hauteur à roulettes

Table with 4 columns: Reinforced Table, Mobile table, Reinforced adjustable table, Mobile adjustable table. Describes different table configurations and their components.

Electric height controller
Controlador de altura eléctrico
Contrôleur de hauteur électrique

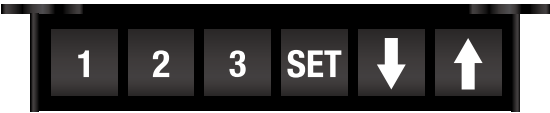

- 1 Set height 1 (exp.750mm)
Altura programada 1 (exp.750mm)
Hauteur prévue 1 (exp.750mm)
2 Set height 2 (exp.850mm)
Altura programada 2 (exp.850mm)
Hauteur prévue 2 (exp.850mm)
3 Set height 3 (exp.900mm)
Altura programada 3 (exp.900mm)
Hauteur prévue 3 (exp.900mm)
SET Reset height
Reprogramar altura
Reprogrammation hauteur
Manual height adjust
Ajuste de altura manual
Réglage manuel de la hauteur

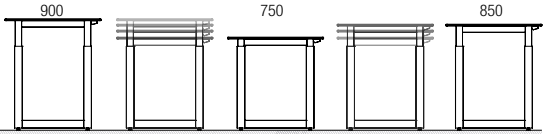

Customization


Industrial Laborum Ibérica is always open to new and challenging proposals to satisfy the needs of its customers, with a team of professionals behind, all challenges are realized with excellence and perfectionism, satisfying the requirements.

A Industrial Laborum Ibérica está sempre aberta a novas e desafiantes propostas para satisfazer as necessidades dos seus clientes, com uma equipa de profissionais por detrás, todos os desafios são concretizados com excelência e perfeccionismo, satisfazendo os requisitos espectáveis.

Industrial Laborum Ibérica est toujours ouverte aux propositions nouvelles et stimulantes pour satisfaire les besoins de ses clients. Avec une équipe de professionnels derrière, tous les défis sont réalisés avec excellence et perfectionnisme, en satisfaisant les exigences.


Custom table with sink and tap, incastrated TV, outlets, sound system, and articulated harm for computer and for projector.

Mesa personalizada com pia e torneira, TV embutida, tomadas, sistema de som e braço articulado para computador e projetor.
Table personnalisée avec cuve et robinet, TV incastradée, prises, système de son et bras articulé pour ordinateur et projecteur.

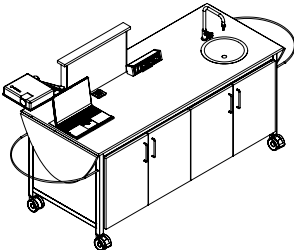

Custom table with sink and tap on casters

Mesa rodada customizada com pia e torneira
Table à roulettes personnalisée avec cuve et robinet

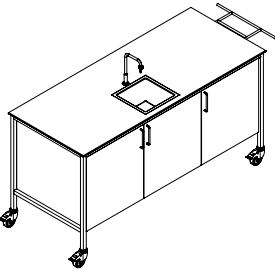

iberica

Industrial Laborum

lab integrated systems

sede

Rua Alfredo Cunha, nº155, Loja 34
4450-023 Matosinhos
Portugal

instalações fabris

Sobreiro Torto, Branca - Apt. 187
3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal

delegação comercial

Rua Professor Mernári Cidade 11b
1600-631 Lisboa , Portugal

T +351 234 629 500
F +351 234 629 263

www.industriallaborum.com