

PHARMACEUTICAL CABINETS

MÓDULOS FARMACÉUTICOS
ARMOIRES PHARMACEUTIQUES

PHARMACEUTICAL CABINETS

ARMÁRIOS FARMACÊUTICOS

ARMOIRES A PHARMACIE



PHARMACEUTICAL CABINETS

Furniture with 1 drawer for pharmaceuticals that do not need exhaustion. The laboratory furniture is used for storing and storing chemicals in accordance with EN 14727.

Safe storage and organization is one of the most important requirements in a laboratory. And the best location for such is precisely close to the work surface, although space is often reduced. In this sense, Industrial Laborum has designed pharmaceutical furniture, with several standard dimensions, maximizing the work area: they serve as support for the benches, for the storage of permanent use material or for active storage. All furniture is designed in particular, but always integrated into a modular system.

- In this process, other criteria are also considered:
- Maximum storage space;
 - Easily cleaned and decontaminated surfaces;
 - Maximum security;
 - Greater mobility and adaptability
 - Chemical resistance, impact and fatigue;
 - Care in the constructive details and finishings;
 - High structural and dimensional stability;
 - Protection and / or reinforcement of fragile points.

Furniture with SEFA 8 certification, designed and manufactured according to EN 14056 - Laboratory Furniture - Design and Installation Recommendations; EN 14727 - Laboratory Furniture - Storage Units for Laboratory - Requirements and Test Methods.

ARMÁRIOS FARMACÊUTICOS

Móveis com 1 gavetão para produtos farmacêuticos que não necessitem exaustão. O mobiliário de laboratório é utilizado para arrumação e armazenamento de substâncias químicas, em conformidade com a norma EN 14727.

A arrumação e organização em segurança são um dos requisitos mais importantes num laboratório. E a melhor localização para tal é precisamente perto da superfície de trabalho, ainda que o espaço seja muitas vezes reduzido. Neste sentido, a Industrial Laborum projetou móveis farmacêuticos, com várias dimensões standard, rentabilizando ao máximo a área de trabalho: servem de apoio às bancadas, destinando-se ao armazenamento de material de uso permanente ou para arquivo activo.

Todos os móveis são projetados em particular, mas sempre integrados num sistema modular. Neste processo, são considerados, ainda, outros critérios:

- Máximo espaço útil de armazenamento;
- Superfícies de fácil limpeza e descontaminação;
- Máxima segurança;
- Maior mobilidade e adaptabilidade
- Resistência química, impacto e fadiga;
- Cuidado nos pormenores construtivos e nos acabamentos;
- Elevada estabilidade estrutural e dimensional;
- Protecção e/ou reforço dos pontos considerados frágeis.

Móveis com certificação SEFA 8, projetados e fabricados de acordo com as normas EN 14056 – Mobiliário de Laboratório – Recomendações de Projecto e Instalação; EN 14727 – Mobiliário de Laboratório - Unidades de Arrumação para Laboratório – Requisitos e Métodos de Teste.

ARMOIRES À PHARMACIE

Meuble avec 1 tiroir pour produits pharmaceutiques ne nécessitant pas d'épuisement. Le mobilier de laboratoire est utilisé pour stocker des produits chimiques conformément à la norme EN 14727.

Un stockage et une organisation sûrs sont l'une des exigences les plus importantes d'un laboratoire. Et le meilleur emplacement pour cela est précisément à proximité de la surface de travail, même si l'espace est souvent réduit. Dans ce sens, Industrial Laborum a conçu des meubles pharmaceutiques, avec plusieurs dimensions standard, maximisant l'espace de travail: ils servent de support aux bancs, au stockage de matériel à usage permanent ou au stockage actif.

Tous les meubles sont conçus en particulier, mais toujours intégrés dans un système modulaire. Dans ce processus, d'autres critères sont également pris en compte:

- espace de stockage maximal;
- surfaces faciles à nettoyer et à désinfection;
- sécurité maximale;
- Plus grande mobilité et adaptabilité
- résistance chimique, impact et usure;
- Méfiez-vous des détails constructifs et des finitions;
- stabilité structurelle et dimensionnelle élevée;
- Protection et / ou renforcement des points fragiles.

Meubles certifiés **SEFA 8**, conçus et fabriqués conformément à la norme **EN 14056** - Mobilier de laboratoire - Recommandations de conception et d'installation; **EN 14727** - Mobilier de laboratoire - Unités de stockage pour laboratoire - Exigences et méthodes d'essai.

PHARMACEUTICAL CABINETS

ARMÁRIOS FARMACÊUTICOS
ARMOIRES PHARMACEUTIQUES

Right side wall
Parede lateral direita
Mur latérale droite

Central wall
Parede central
Mur centrale

Left side wall
Parede lateral esquerda
Mur latérale gauche


PHARMACEUTICAL CABINETS

Industrial Laborum presents the pharmaceutical cabinet with a total length of drawer on telescopic rails.

The interior is a set of shelves, organized according to the storage needs. The pharmaceutical cabinets can be single, double and/or triple, with one, two or three drawers, based on a single bottom of stainless steel.

The drawers can contain:

- Side shelves: the content's access is provided by one side of the cabinet;
- Central shelves: the shelf is divided in half and access to different partitions is done by their side.

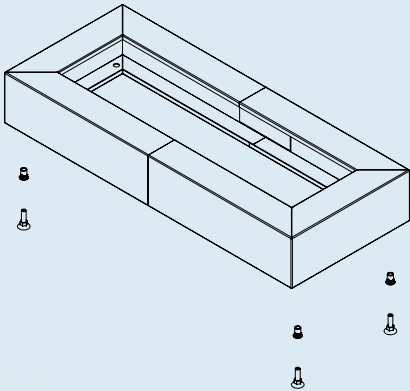

ARMÁRIOS FARMACÊUTICOS

A Industrial Laborum apresenta o armário farmacêutico com extensão total da gaveta sobre calhas telescópicas. O interior é constituído por um conjunto de prateleiras organizadas segundo os requisitos das necessidades de arrumação.

Os armários farmacêuticos podem ser simples, duplos e/ou tripos, com um, dois, ou três gavetões, assentes num rodapé único de aço inox.

Os gavetões podem conter:

- Prateleiras laterais: o acesso ao conteúdo é facultado por um dos lados do armário;
- Prateleiras centrais: a prateleira é dividida ao meio e o acesso às diferentes divisórias é feito pelo respectivo lado.

ARMOIRES PHARMACEUTIQUES

Industrial Laborum présente l'armoire pharmaceutique avec une extraction totale des tiroirs sur rails télescopiques. L'intérieur est composé d'un ensemble d'étagères, organisé selon les besoins de stockage.

Les armoires pharmaceutiques peuvent être simples, doubles et/ou triple, avec un, deux ou trois tiroirs, basés sur une plinthe en acier inoxydable.

Les tiroirs peuvent contenir:


- Étagères latérales: l'accès au contenu est fourni par un côté de l'armoire;
- Étagères centrales: le plateau est divisé en deux au milieu et l'accès aux différentes partitions se fait par leur côté.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

General dimensions



Dimensões gerais
Dimensions générales

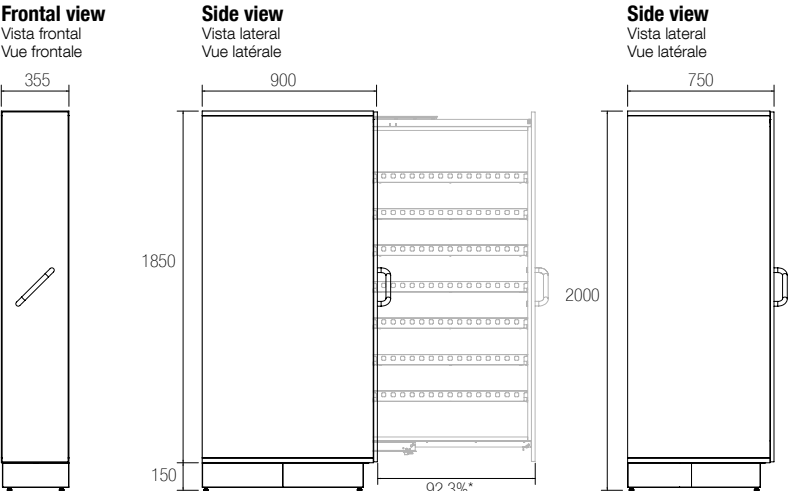

* the drawer can be open up to 92.3% of the depth of the cabinet
* a gaveta pode ser aberta até 92,3% da profundidade do armário
* le tiroir peut être ouvert jusqu'à 92,3% de la profondeur de l'armoire

Interior typology

Tipologias de interior
Typologies intérieures

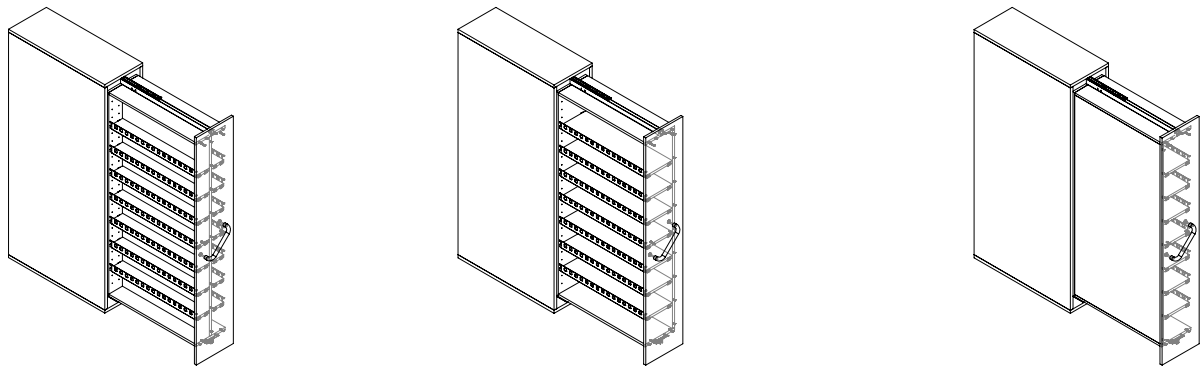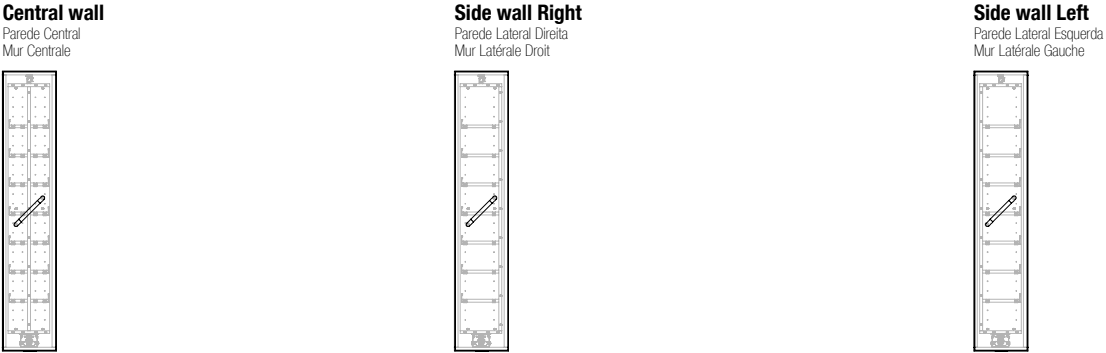

Cabinet body

Corpo do móvel
Corps du cabinet

MELAMINE
MELAMINA
MÉLAMINE



Closed plinth

Rodapé fechado
Plinthe fermé

STAINLESS STEEL
AÇO INOX
ACIER INOXYDABLE



Choose the setting

Escolha a configuração
Choisissez le réglage


Decide the quantity of cabinets, choose the typology, (central, right or left wall) and then add the plinth(s).

Décidez a quantidade de armários, escolha a tipologia (parede central, direita ou esquerda) e adicione o(s) rodapé(s).

Décidez du nombre d'armoires, choisissez la typologie (mur central, droit ou gauche) puis ajoutez-la le(s) plinthe(s).


User interaction

Intereção com o utilizador
interaction de l'utilisateur

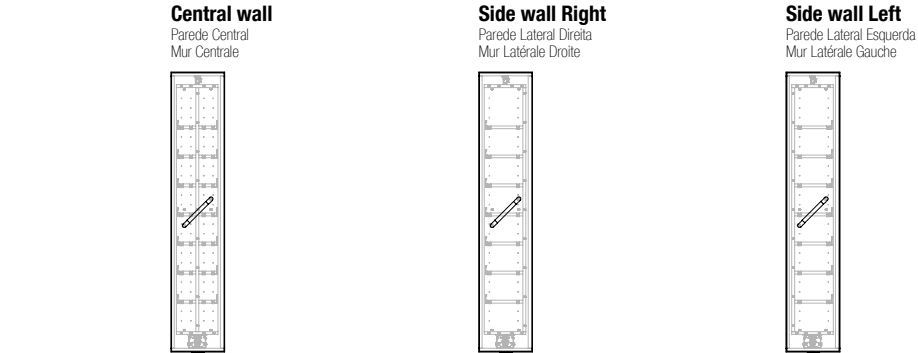



L x W x H*			
355x750x1850	551-0003	551-0001	551-0002
355x900x1850	551-0004	551-0005	551-0006

*Length x Width x Height
*Comprimento x Largura x Altura
*Longueur x Largeur x Hauteur

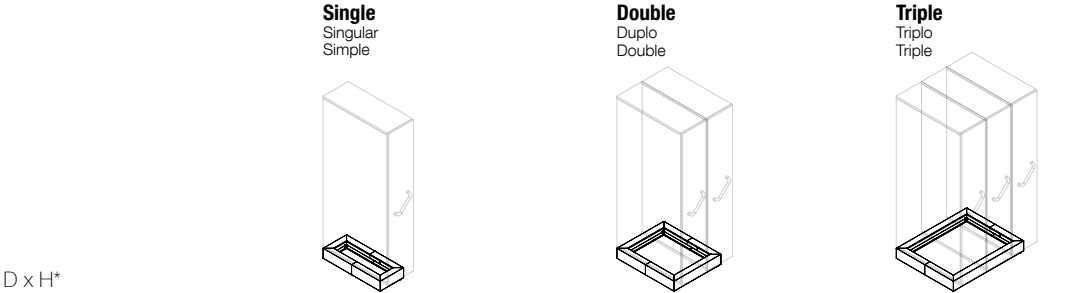

D x H*			
750x150	552-1001	552-1003	552-1005
900x150	552-1002	552-1004	552-1006

*Depth x Height
*Profundidade x Altura
*Profondeur x Hauteur

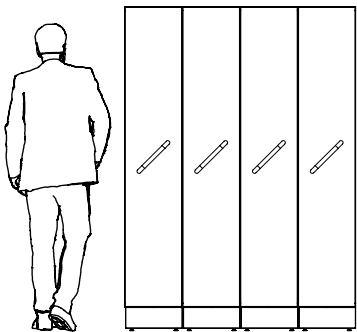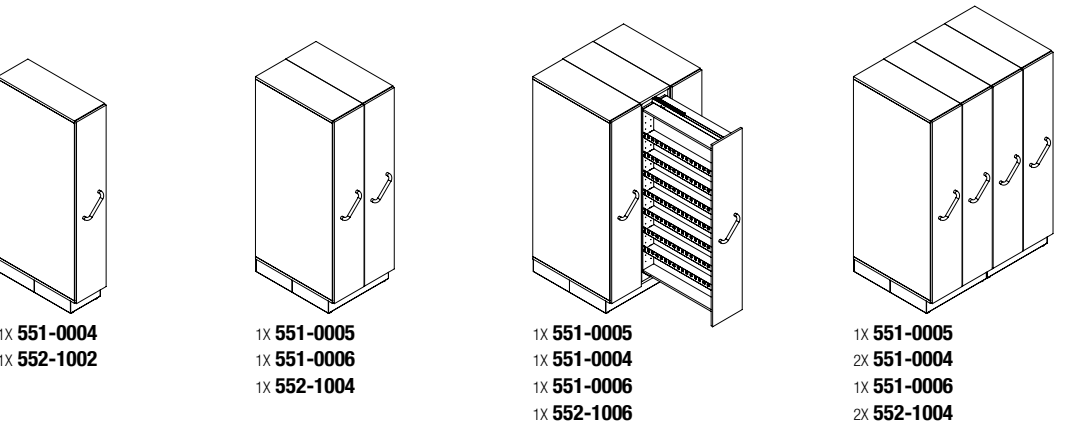

Cabinet height 2000mm;
user 95% percentile

Altura do armário 2000mm;
utilizador de percentil 95%
Hauteur de meuble 2000mm;
utilisateur 95% percentile



Hardware

Ferragens
Matériel


Telescopic track

Caixa telescópica
Rail télescopique

Telescopic gauge for pharmaceutical cabinet, with a maximum load of 200kg, easy installation and adjustment, smooth sliding even at maximum weight without deflection in the extended position and does not require lubrication.

Caixa telescópica para armário de gavetão farmacêutico, com carga máxima de 200kg, de fácil instalação e ajuste, deslizamento suave, mesmo no peso máximo, sem deflexão na posição estendida e não necessita de lubrificação.


Rail télescopique pour armoire pharmaceutique, avec une charge maximale de 200 kg, de facilité d'installation et de réglage, coulissement en douceur, même à poids maximal, sans déflexion dans la position étendue et ne nécessite pas de lubrification.

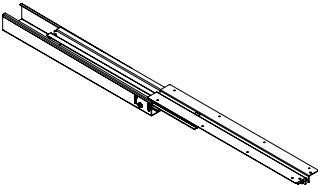

Handle

Puxador
Poignée

Stainless steel handle
Puxador em aço inoxidável
Poignée en acier inoxydable

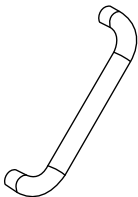



Shelves

Prateleiras
Étagères

Pharmaceutical drawer cabinets come with 7 shelves (Standard). Optionally more shelves can be supplied in up to 14 shelves, which can be adjusted in height.

Os armários de gavetão farmacêutico são fornecidos com 7 prateleiras na versão standard. Opcionalmente, podem ser fornecidas mais prateleiras num número máximo de 14 prateleiras que podem ser ajustadas em altura.

Les armoires à tiroirs pharmaceutiques sont équipées en standard de 7 étagères. En option, plus d'étagères peuvent être fournies sur un maximum de 14 étagères qui peut être ajusté en hauteur.

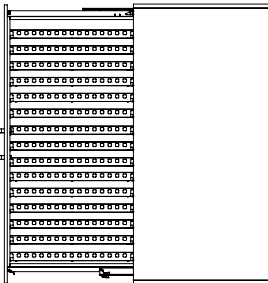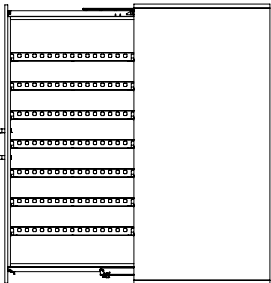


Finishes

Acabamentos
Finitions

Cabinet body

Corpo do móvel
Corps du cabinet

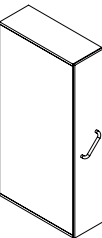

STANDARD
MELAMINE
MELAMINA
MELAMINE



STANDARD



U 908 - ST2



U 708 - ST9

Closed plinth

Rodapé fechado
Plinthe fermé



STANDARD
STAINLESS STEEL
AÇO INOX
ACIER INOXYDABLE



STANDARD



Natural



ibérica

Industrial Laborum

l a b i n t e g r a t e d s y s t e m s

sede

Rua Alfredo Cunha, nº155, Loja 34
4450-023 Matosinhos
Portugal

instalações fabris

Sobreiro Torto, Branca - Apt. 187
3854-909 Albergaria-a-Velha
Portugal

delegação comercial

Rua Professor Mernáni Cidade 11b
1600-631 Lisboa , Portugal

T +351 234 529 500
F +351 234 528 263

www.industriallaborum.com